

ENDOSCOPIOS RÍGIDOS HISTEROSCOPIOS

LA MÁS ALTA CALIDAD ALEMANA EN ENDOSCOPIOS



Made in Germany

- Alta resolución
- Gran campo de visión
- Excelente eficiencia lumínica




OPTOMIC®
producing quality

Desde hace 70 años, en Alemania, la firma HENKE SASS WOLF GmbH fabrica instrumentos de uso médico de la más alta calidad y prueba de ello es su reconocida reputación internacional.

La gran calidad de los histeroscopios fabricados por HENKE SASS WOLF es el resultado de su larga experiencia, su continua investigación y sus excelentes procesos de fabricación y control.


ENDOSCOPIOS RÍGIDOS **HISTEROSCOPIOS**

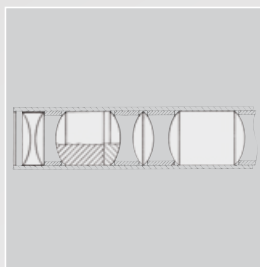


SISTEMA DE LENTES CILÍNDRICAS



CUERPO DE ACERO INOXIDABLE

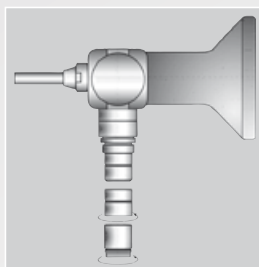

ADAPTADORES

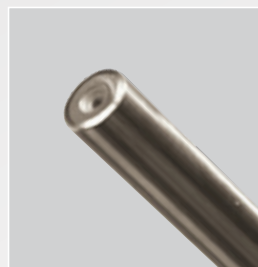

LENTES DE ZAFIRO DE ALTA RESISTENCIA



OCULAR DE PEEK

			0°	12°	30°	70°
HISTEROSCOPIO	Ø	Longitud				
	2,7mm	270mm	●		●	
	4mm	300mm	●	●	●	●

● Autoclavable

- Los histeroscopios HSW son fabricados bajo normas "ISO 9001" y todos ellos son testeados con el más moderno sistema de control óptico computerizado (MTF).
- Fiabilidad y durabilidad son el resultado de la celosa preocupación que pone HENKE, SASS WOLF en la fabricación de sus endoscopios, razón por la cual es una de las marcas líderes mundiales.
- Histeroscopios con sistema de lentes cilíndricas.
- Adaptadores para conexión a cables de fibra óptica tipo Storz/Olympus, Wolf y ACMI.
- Cuerpo de acero inoxidable sellado por soldadura láser.
- Endoscopios autoclavables con lentes de zafiro de alta resistencia al rayado.
- Ocular de PEEK de alta resistencia al calor.

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.

Tel: 91 804 44 44

comercial@optomic.com

www.optomic.com



producing quality

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso

