

ENDOSCOPIOS RÍGIDOS HISTEROSCOPIOS

LA MÁS ALTA CALIDAD ALEMANA EN ENDOSCOPIOS


- Alta resolución
- Gran campo de visión
- Excelente eficiencia lumínica



OPTOMIC®
producing quality

La gran calidad de los histeroscopios OPTOMIC, es el resultado de su larga experiencia, su continua investigación y de sus excelentes procesos de fabricación y control.


ENDOSCOPIOS RÍGIDOS HISTEROSCOPIOS

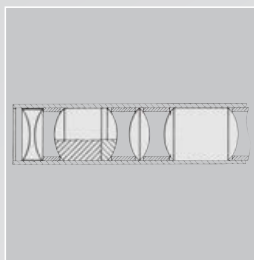


SISTEMA DE LENTES CILÍNDRICAS



CUERPO DE ACERO INOXIDABLE

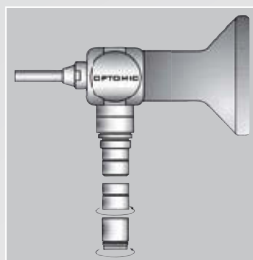

ADAPTADORES

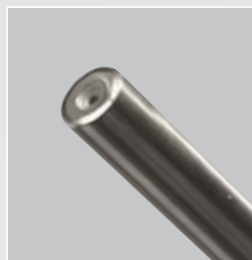

LENTES DE ZAFIRO DE ALTA RESISTENCIA



OCULAR DE PEEK

	Ø	Longitud	0°	12°	30°	70°
HISTEROSCOPIO	2,7mm	270mm	● ●		● ●	
	4mm	300mm	● ●	● ●	● ●	● ●

● No-Autoclavable ● Autoclavable

- Los histeroscopios OPTOMIC son fabricados bajo normas "ISO 9001" y todos ellos son testeados con el más moderno sistema de control óptico computerizado (MTF).
- Fiabilidad y durabilidad son el resultado de la celosa preocupación que pone OPTOMIC en la fabricación de sus histeroscopios, razón por la cual es una de las marcas líderes mundiales.
- Histeroscopios con sistema de lentes cilíndricas.
- Adaptadores para conexión a cables de fibra óptica tipo Storz/Olympus, Wolf y ACMI.
- Cuerpo de acero inoxidable sellado por soldadura láser.
- Endoscopios autoclavables con lentes de zafiro de alta resistencia al rayado.
- Ocular de PEEK de alta resistencia al calor.

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.
Tel: 902 22 11 77 • Fax: 902 22 11 78
comercial@optomic.com • www.optomic.com



Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso

