

SILLÓN DE EXPLORACIÓN OP-G7+

DISEÑO ÓPTIMO PARA GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA



- Movimientos eléctricos con 4 motores independientes
- Gran capacidad de carga: 310Kg
- Excepcional bajada mínima: 48cm
- Reposapiernas motorizado

OP-G7+ UN SILLÓN PENSADO PARA SER EFICAZ

El sillón de exploración OP-G7+ está diseñado con el objetivo de satisfacer todas las necesidades del especialista en ginecología y obstetricia .

Esta versatilidad se debe a su amplia capacidad de movimientos gracias a sus cuatro motores independientes y a su sistema modular de accesorios que permiten al profesional combinarlos de acuerdo a las necesidades concretas de su consulta.

Fabricado con los materiales de mayor calidad, poniendo toda la atención en las necesidades ergonómicas y utilizando un sistema de acolchados cómodos e higiénicos, es como OPTOMIC se asegura proporcionar la mejor experiencia para médico y paciente.



ACCESO SIN BARRERAS PARA PACIENTE Y PROFESIONAL

OPTOMIC ha puesto todo su esfuerzo en el sillón OP-G7+ para crear un equipo eficiente para el especialista a la par que cómodo y amigable para el usuario.

■ ALTURA MÍNIMA DE 48 cm

Pensada para facilitar al máximo el acceso del paciente. Atendiendo especialmente a los de movilidad reducida, pacientes de edad avanzada o con minusvalía.




■ MOVIMIENTO REPOSAPIERNAS PARA ASISTENCIA AL PACIENTE

Este tercer plano motorizado sirve como asistencia al paciente para alcanzar la posición correcta de exploración sin la intervención del profesional.



■ PERNERA PLANTAR DE CÓMODO ACCESO

Su altura mínima, a tan solo 34cm del suelo, facilita la salida y entrada de la paciente.

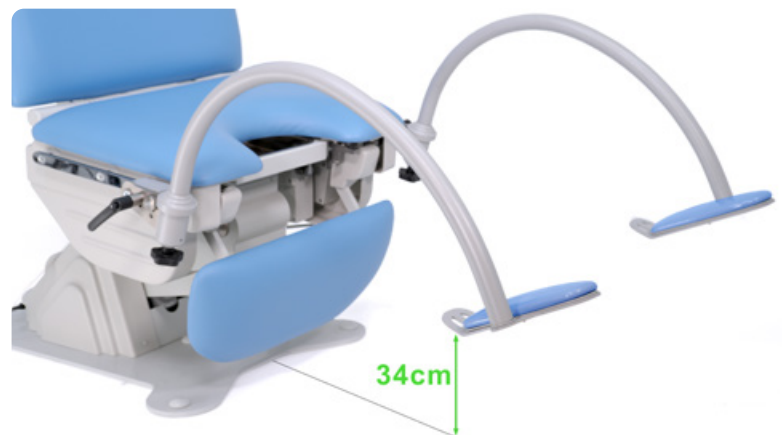

■ CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE HASTA 310 Kg

El profesional podrá usar el sillón, con pacientes de elevado peso, con la confianza de que responderá a las necesidades más exigentes.

■ REPOSAPIERNAS MOTORIZADO ESCAMOTEABLE

El reposapiernas se pliega por debajo del asiento dando al profesional un amplio espacio de movimiento para el desarrollo de su trabajo.



MOVIMIENTOS MOTORIZADOS E INDEPENDIENTES

Encuentre la posición deseada de una manera cómoda y guárdela para la siguiente exploración en una de las cuatro memorias internas.

La independencia de movimientos de los elementos del OP-G7+ le permiten adaptarse a los requerimientos que cada una de las especialidades demanda.

MOVIMIENTO PÉLVICO

Facilita la exploración permitiendo situar el sillón en una posición cómoda y natural para profesional y paciente.



MOVIMIENTO SUBIDA/BAJADA

Posición mínima excepcionalmente baja para facilitar el acceso al paciente (especialmente a los de movilidad reducida).



SILLÓN DE EXPLORACIÓN OP-G7+

MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE RESPALDO Y REPOSAPIERNAS

Control total de todos los movimientos mediante mando o pedal.

La combinación de posiciones de respaldo, asiento y reposapiernas permite al OP-G7+ adaptarse a todas las necesidades posturales requeridas en ginecología y obstetricia.



POSICIÓN TRENDELENBURG Y ANTITRENDELENBURG

Un botón de acceso directo en el mando sitúa al OP-G7+ en la posición trendelenburg cuando las necesidades lo requieran.



CONTROL TOTAL MEDIANTE MANDO O PEDAL

Todos los movimientos pueden ser controlados a través de estos dos dispositivos.


- Mando: Todos los movimientos, acceso directo a Trendelenburg, botón de bloqueo y 4 memorias programables.

- Pedal: Todos los movimientos y 3 memorias programables.



ACCESORIOS PARA TODAS LAS NECESIDADES

Gracias a un sistema de rieles laterales, el OP-G7+ puede ser configurado fácilmente con cualquiera de nuestros accesorios según los requerimientos del especialista. Reposapiés, perneras y reposabrazos son adaptables a la posición más cómoda para profesional y paciente.

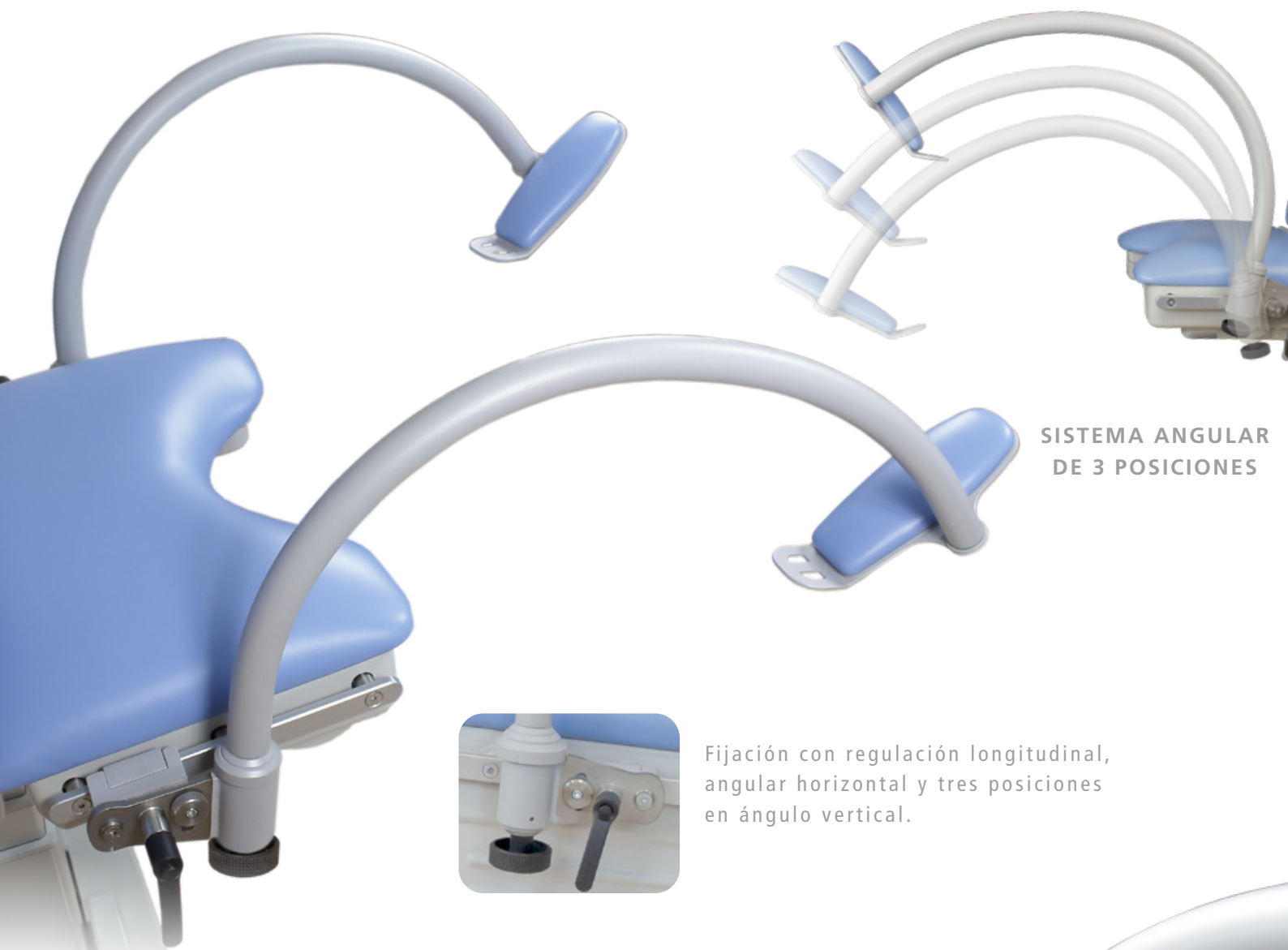

**SISTEMA ANGULAR
DE 3 POSICIONES**

Fijación con regulación longitudinal, angular horizontal y tres posiciones en ángulo vertical.

PERNERA PLANTAR (Opcional)

Sistema de 3 posiciones que permite modificar el ángulo de la pernera para favorecer la exploración ergonómica. También permite una apertura lateral con un sistema de freno gradual.

Altura: mín. 34cm / máx. 147cm

Apoyo plantar extraíble y de fijación magnética para pie calzado o descalzo.





■ **PERNERAS GOEPEL DE SERIE**

De acero inoxidable y acolchadas en poliuretano flexible inyectado, muy duradero y fácilmente lavable.

Las perneras del sillón OP-G7+ pueden regularse en todas las posiciones para alcanzar la mejor posición para la exploración.

Fijación con regulación longitudinal y en altura.

■ **REPOSABRAZOS (Opcional)**

Acolchados y regulables.

Pueden combinarse con reposapiés o perneras aportando un mayor confort al paciente en las exploraciones.



■ **COJÍN AUXILIAR (Opcional)**

Acolchado, regulable en altura y con fijación magnética.



■ **LÁMPARA DE EXPLORACIÓN (Opcional)**

Lámpara de luz LED de alta potencia con regulador de intensidad y brazo flexible para ubicarla fácilmente en cualquier posición.

SILLÓN DE EXPLORACIÓN **OP-G7+**




PORTARROLLOS

Dispone de un portarrollos para extender el papel sobre el respaldo y asiento. Al estar integrado en el sillón ahorra espacio y facilita su acceso y recambio. Admite bobinas de hasta 50cm y hasta 60cm con extensor portarrollos (opcional).

BANDEJA

Fabricada en acero inoxidable y de fácil extracción y limpieza. 2,5l de capacidad.

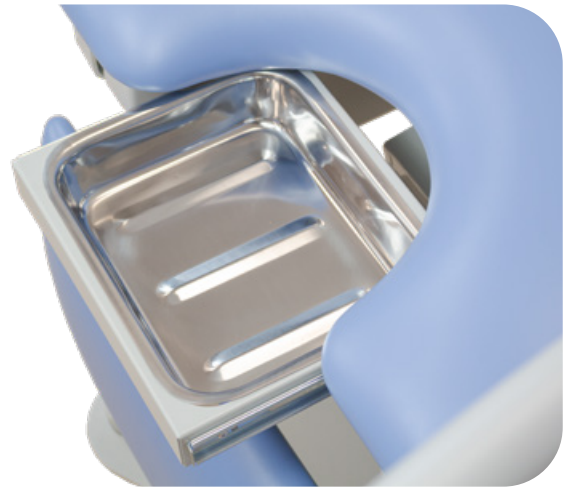

SISTEMA DE RUEDAS OCULTAS (Opcional)

Con un sencillo movimiento de palanca se despliegan unas pequeñas ruedas que permiten al profesional desplazar el sillón cómodamente a la ubicación que desee.



SOPORTE PARA COLPOSCOPIO (Opcional)

El sillón OP-G7+ permite la adaptación de una amplia gama de colposcopios mediante un resistente soporte diseñado específicamente para ello.

GAMA DE COLORES

Tapizado disponible en varios colores.

Elija el más adecuado para su consulta.

El material del tapizado es sintético, impermeable, lavable y con tratamiento anti-bacteriano.



SILLÓN DE EXPLORACIÓN OP-G7+



Sillón ginecológico OP-G7+
Resistencia, comodidad y
fiabilidad para su consulta

CARACTERÍSTICAS

MOVIMIENTO DE SUBIDA/BAJADA
RESPALDO
REPOSAPIERNAS
PÉLVICO
TRENDELEBURG
ANTI-TRENDELEBURG
MANDO Y PEDAL DE CONTROL
PERNERAS MODELO GOEPEL
BANDEJA DE SECRECIONES
PORTAROLLOS
TAPIZADO
NORMATIVA A PRUEBA DE FUEGO
CONEXIÓN A RED
CARGA MAXIMA ADMISIBLE

Columna motorizada. 480mm mín. / 1020mm máx.
Por motor eléctrico. -30° mín. / 70° máx
Por motor eléctrico. 0° mín. / 110° máx
Por motor eléctrico. 30° máx arriba. / -8° mín por debajo de la horizontal
Inclinación -30°
Inclinación +8°
Control de todos los movimientos + 8 Memorias
Regulación longitudinal, vertical, ángulo, altura y giro.
De acero inoxidable y extraíble. Capacidad 2,5L
Bobina de 50cm máx. / 60cm máx con extensor (opcional)
PUR-PVC Polyester lavable y anti-bacteriano con amplia gama de colores
UNE-EN-1021-1-1 2015
110/240V / 50-60Hz
310kg

ACCESORIOS OPCIONALES

PERNERAS MODELO PLANTAR

Regulación longitudinal, vertical en 3 posiciones y giro en el plano horizontal de 90°.

Almohadilla para apoyo plantar desmontable y con fijación magnética para exploración con o sin calzado.

COJÍN AUXILIAR

Acolchado, regulable en altura y con fijación magnética. Colores a elegir entre la gama de tapizado del OP-G7+

REPOSABRAZOS

Extraíbles. Regulables en altura y posición longitudinal

SOPORTE COLPOSCOPIO


Apto para una amplia gama de colposcopios. Ubicable a la derecha o a la izquierda del sillón

LÁMPARA DE EXPLORACIÓN

LED de alta potencia con regulador de intensidad y brazo flexible

SISTEMA DE RUEDAS

Sistema para desplazamiento con ruedas ocultas desplegadas mediante mecanismo de palanca.

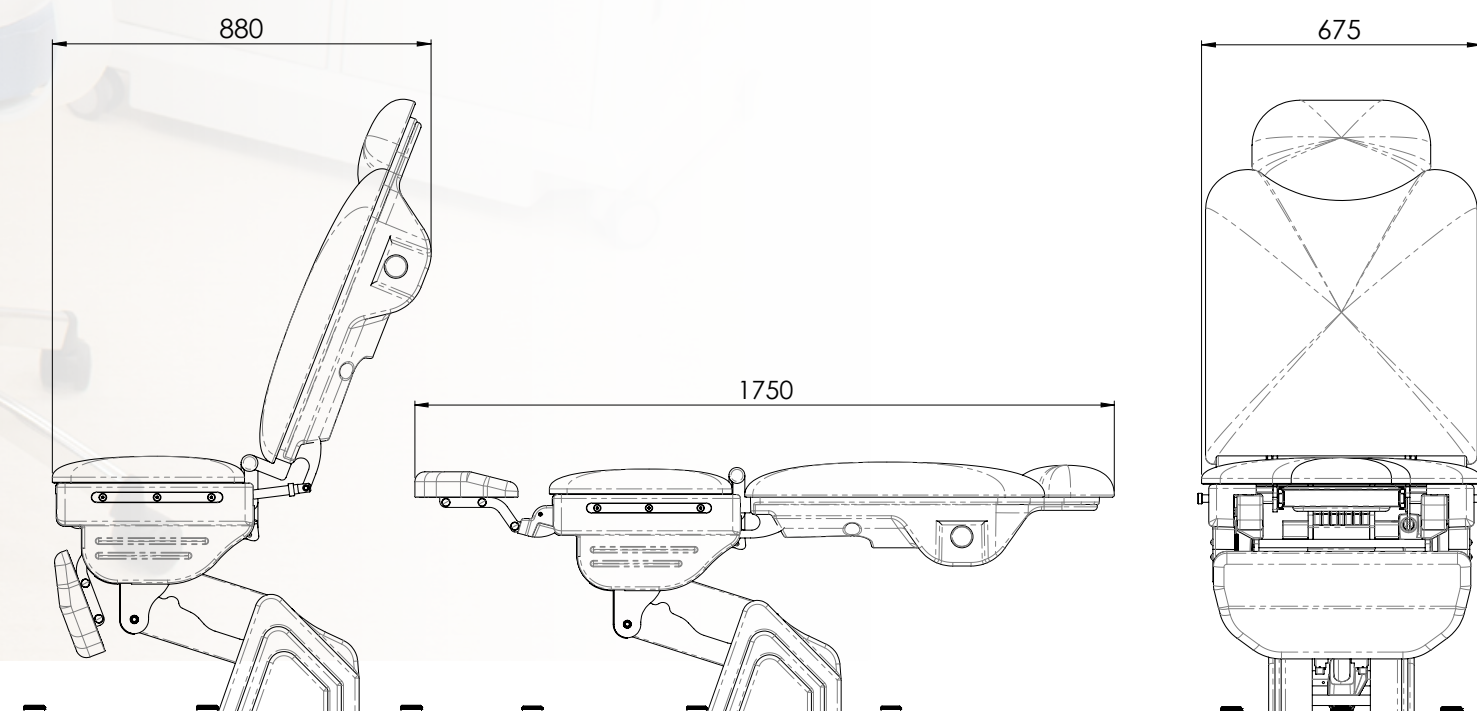



OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.

Tel: 91 804 44 44

comercial@optomic.com

www.optomic.com

